


Xem sách hướng dẫn sử dụng để có thông tin đầy đủ hơn:
<http://www.mtts-asia.com/vi/dolphin-cpap/>

Bộ dây thở, buồng PEEP và bình làm ẩm


Bước này không áp dụng cho việc tiệt trùng cấp cảm biến nhiệt.

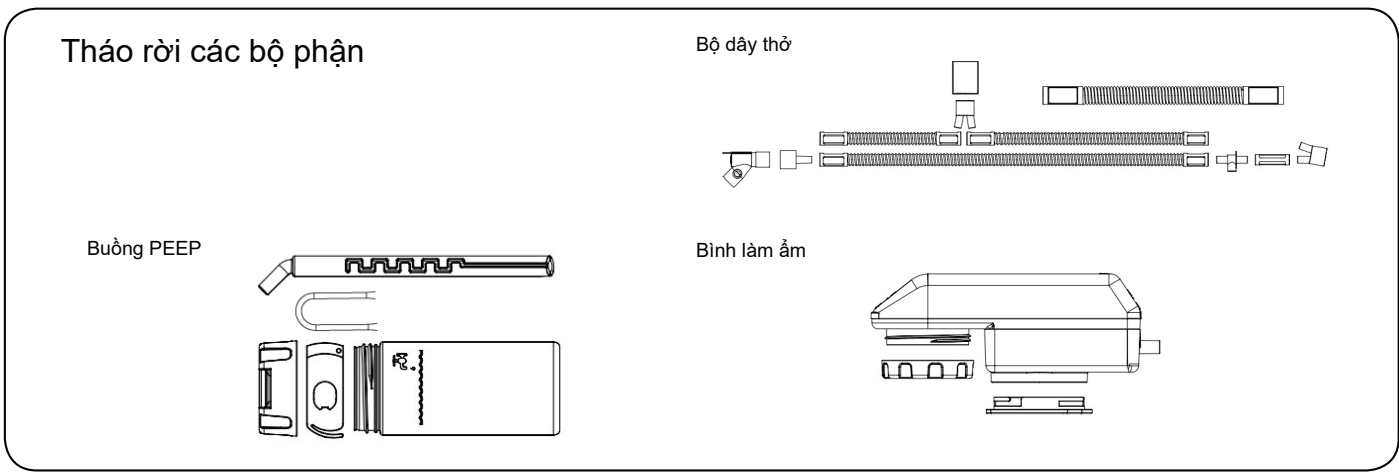

Hấp tiệt trùng

Phương pháp	Nhiệt độ	Thời gian
Tiệt trùng bằng hơi nước (Chân không sơ bộ)	134°C	4 Phút
Tiệt trùng bằng hơi nước (Dịch chuyển trọng lực)	134°C	20 Phút

hoặc

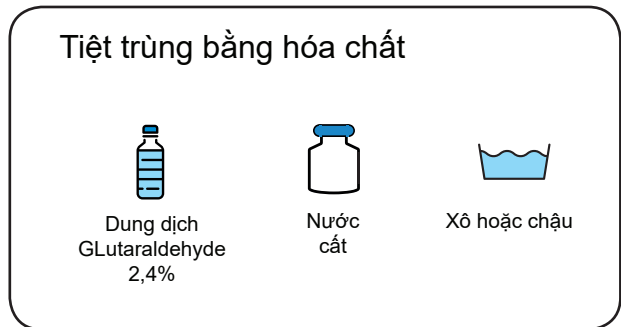

Cáp cảm biến nhiệt

Cáp cảm biến nhiệt



Vệ sinh



Độ cồn 70%



Vải mềm



Đảm bảo rửa tay sạch sẽ và/ hoặc đeo găng tay tiệt trùng khi lắp ráp lại dây dẫn truyền khí.

Dolphin CPAP có một số bộ phận cần thay thế hoặc bảo dưỡng trong quá trình sử dụng, bao gồm:

Tên bộ phận	Thời gian sử dụng	Thông tin bảo dưỡng
Bình làm ẩm	2 năm hoặc 150 lần sử dụng	Thay thế khi cần thiết
Buồng PEEP		
Bộ dây thở		
Chổi		
Bộ lọc khí	6 tháng	Vệ sinh/ thay thế theo bước 1 của phần này
Cảm biến Oxy	18 tháng	Cứ 3 tháng thì hiệu chỉnh lại 1 lần theo bước 2 của phần này. Liên hệ với đại diện của MTTTS để thay thế.