



Consulter le Manuel d'Utilisation pour de plus amples informations:
<http://www.mtts-asia.com/dolphin-cpap/>


Circuit respiratoire, Chambre PEEP et Humidificateur




Ne pas inclure le câble du capteur de température dans ce processus.

Desassemblage


Chambre PEEP

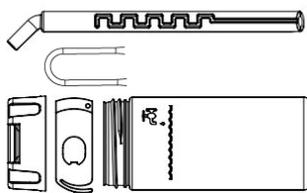

Circuit respiratoire

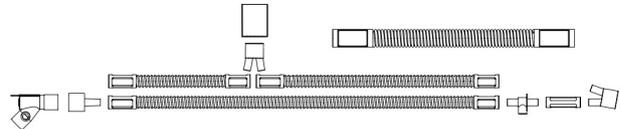

Humidificateur

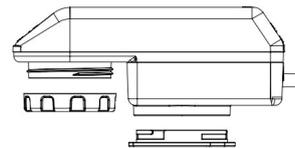

Nettoyage



Brosse de nettoyage



Tissu de nettoyage



Détergent doux



Evier ou godet



Eau Distillée

Autoclave

Méthode	Temp.	Temps
Autoclave à vapeur (pre-vacuum)	134°C	4 min
Autoclave à vapeur (gravity displacement)	134°C	20 min

OU

Désinfection chimique



Solution 2.4% Glutaraldehyde



Eau Distillée



Evier ou godet

Câble du capteur de Température

Câble du capteur de Température



Nettoyage



De l'alcool
70%



Tissu de
nettoyage



Assurez-vous de laver les mains et / ou porter des gants stériles lorsque remontage du circuit de respiration.

La CPAP Dolphin inclus un certain nombre de pièces qui doivent être remplacée ou contrôlée pendant la durée de vie du matériel. Ces pièces incluent :

Composant	Durée de vie approx.	Information pour la Maintenance
Humidificateur	2 ans ou 150 utilisations	Remplacez les pièces quand nécessaire
Chambre PEEP		
Circuit respiratoire		
Brosse de nettoyage		
Filtre à Air	6 mois	Nettoyer / remplacer selon à l'étape 1 sur p.47 dans le manuel de l'utilisateur.
Capteur d'Oxygène	18 mois	Calibrer tous les 3 mois selon l'étape 2 sur p.48 dans le manuel de l'utilisateur. Contacter le représentant de MTTs pour remplacement.