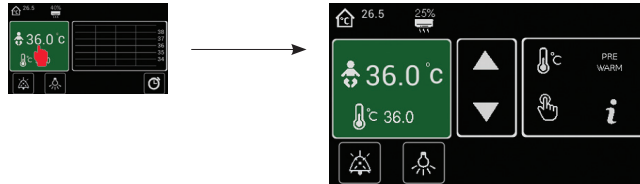




Consulter le Manuel d'Utilisation pour de plus amples informations:  
<http://www.mttts-asia.com/wallaby-warmer/>


## Modes de fonctionnement

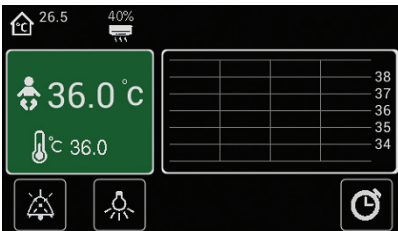Appuyez sur le panneau de sélection de mode pour accéder à l'écran de sélection de mode



### MODE BÉBÉ


Régler la température:  
34°C - 37.5°C



En MODE BÉBÉ, le réchaud procure un contrôle stable de la température de la peau du bébé en ajustant automatiquement la puissance de celui-ci pour compenser les variations des conditions physiologiques et environnementales.

### MODE PRE-CHAUFFAGE

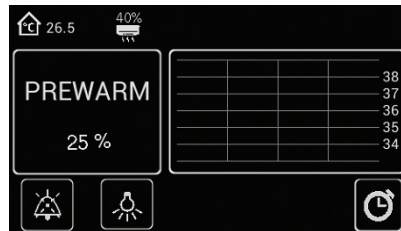
Température de consigne:  
non disponible



En mode PRE-CHAUFFAGE, le réchauffeur assure un préchauffage général sans alarme du réchauffeur et de l'environnement au-dessus du matelas chauffant.

### MODE MANUEL

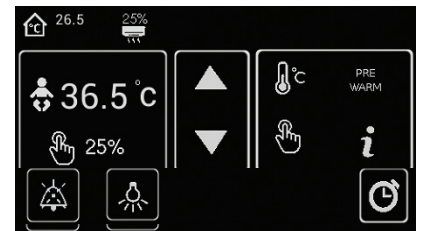Régler la puissance de chauffage:0-100%



En MODE MANUEL, le réchaud fournit une puissance de chauffage réglable par l'utilisateur et la possibilité de surveiller la température de la peau du bébé à l'aide d'un capteur de peau.




Si la température de la peau du patient est supérieure de 1 ° C au-dessus du point de consigne, le chauffage est désactivé et la valeur de sortie affichée est 0 [zéro].

## Les minuteries

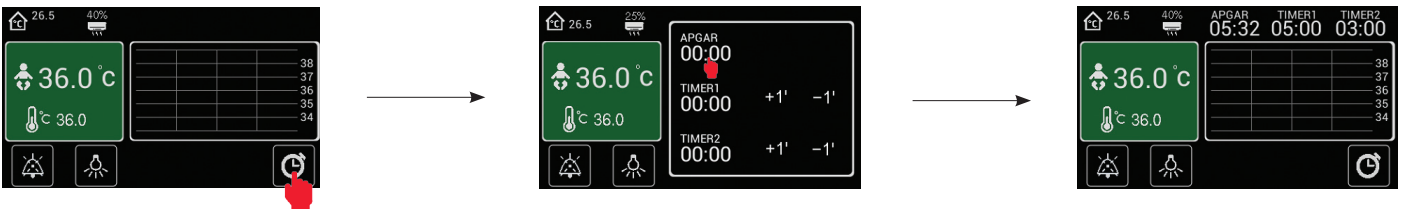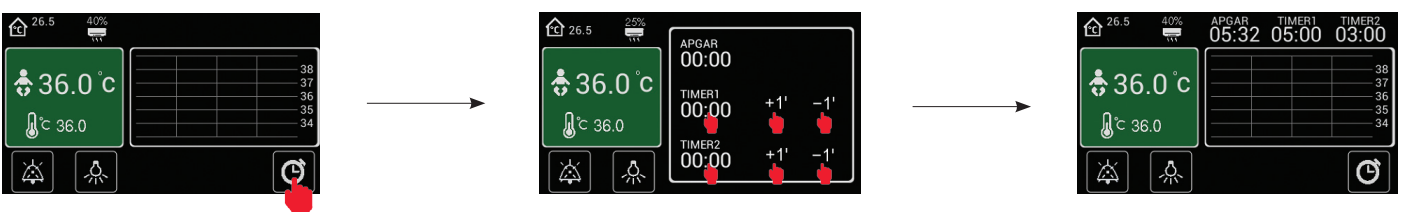
### APGAR

Alarme à 1, 5 et 10 minutes. S'éteint après 60 minutes.


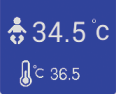





### TEMPORISATEURS DE PROCEDURE

Alarme à la fin de la période pré-réglée de 1 à 99 minutes.



## Les alarmes

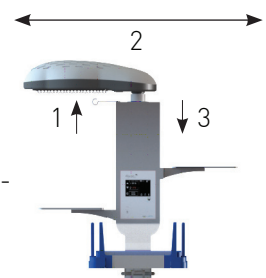
Alarme	Mode	Cause	Effet	Bouton de sourdine
<b>TEMP DE LA PEAU ÉLEVÉE</b> 	BÉBÉ	Température cutanée mesurée supérieure à la température définie de 1 ° C	Puissance de chauffage désactivée	Silence alarme sonore uniquement
	MANUEL	Température cutanée mesurée supérieure à 38 ° C	Puissance de chauffage désactivée	Silence alarme sonore uniquement
	PRE-CHAUFFAGE	Pas actif	Pas actif	Pas actif
<b>TEMP DE LA PEAU BAS</b> 	BÉBÉ	Température cutanée mesurée inférieure à la température définie de 1 ° C	Chauffage réduit à 25% de la puissance	Annule l'alarme et rétablit la puissance du chauffage
	MANUEL	Pas actif	Pas actif	Pas actif
	PRE-CHAUFFAGE	Pas actif	Pas actif	Pas actif
<b>CAPTEUR DECONNECTER</b> 	BÉBÉ	Capteur de peau débranché ou défectueux	Chauffage réduit à 25% de la puissance	Silence alarme sonore uniquement
	MANUEL	Pas actif	Pas actif	Pas actif
	PRE-CHAUFFAGE	Pas actif	Pas actif	Pas actif
<b>PANNE ÉLECTRIQUE</b> 	TOUT	L'alimentation électrique du réchauffeur a échoué	Réchauffeur désactivé	Silence alarme sonore uniquement
<b>ERREUR</b> 	TOUT	Défaillance logicielle ou matérielle (reportez-vous au manuel d'entretien pour plus d'informations sur les codes d'erreur)	Réchauffeur désactivé	Silence alarme sonore uniquement





Lorsqu'elle est disponible, la période d'alarme de mise en sourdine est de 10 min.

## Procédure de radiographie

1. Eteignez l'interrupteur principal de l'appareil et désactivez l'alarme de coupure de courant
2. Attendez que l'appareil refroidisse
3. Soulevez l'unité supérieure
4. Déplacez l'unité supérieure à gauche ou à droite
5. Une fois la procédure de radiographie terminée, ramenez l'appareil suspendu en position centrale.
6. Assurez-vous que l'unité suspendue est verrouillée dans la position centrale
7. Allumez l'appareil



## Éteindre le réchaud

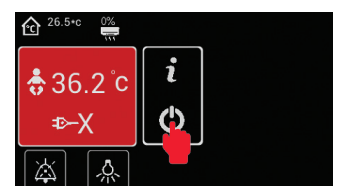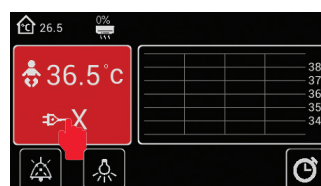

L'action activera l'alarme POWER FAILURE.

Appuyez et maintenez le symbole OFF pendant 3 secondes