



Consulte el Manual del usuario para obtener información completa:
<http://www.mttts-asia.com/wallaby-warmer/>


Lista de componentes opcionales



Polo IV (WLB-1030)



Cajón de almacenamiento
(WLB-1050)

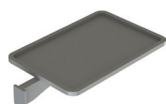

Estante de almacenamiento
(WLB-1040)



Portacilindros (WLB-1060)


Portacilindros (WLB-1060)




2 x Tornillo M10x25

Cajón de almacenamiento (WLB-1050)

- ① Desconecte las partes superior e inferior.
Presione el pestillo negro en ambos lados y deslícelo hacia afuera.

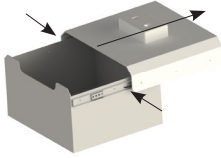

- ② Fije la parte superior a la unidad de control.
Utilice 2 x tornillo M10x25

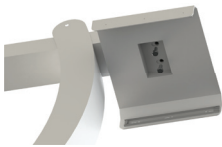

- ③ Conecta la parte inferior.
Deslízate hasta que escuches un sonido de “clic”



Poste IV (WLB-1030) y estante de almacenamiento (WLB-1040)

