

Colibri   
phototherapy

LifeKit by **MTTS**



**PHILIPS**  
LED

**CE** 2265

# COLIBRI

Устройство для фототерапии со **светодиодной подсветкой** для эффективного лечения **желтухи новорожденных** с резервным аккумулятором до 2 часов



## Обычно

- Выбираемые пользователем «стандартный» и «интенсивный» режимы
- Может использоваться с недоношенными и доношенными новорожденными.
- Совместимость с любыми лучистыми обогревателями, детской кроваткой или инкубатором, доступными на рынке.
- Никаких движущихся частей, никаких внутренних вентиляторов

## Светодиодные фонари

- Оптимальный световой спектр для лечения желтухи
- Регулировка высоты максимально увеличивает воздействие на поверхность кожи

## Источник питания

- Блок питания медицинского класса
- Трехконтактное соединение для безопасного электрического заземления (класс I)
- Сохранение энергии

## Панель управления

- Кнопка включения / выключения.
- Кнопка управления для переключения между нормальным и интенсивным режимами

## Дисплей / индикаторы

- Яркий, читаемый светодиодный дисплей показывает время процедуры.
- Счетчик времени лечения
- Счетчик общего системного времени (срок службы)
- Счетчик общего времени системы в интенсивном режиме (срок службы)
- Индикатор стандартного / интенсивного режима

## Стоять

- Регулируемая высота (115-140 см от источника света) для разной высоты кровати
- Прочные ролики с замками



## Габаритные размеры и вес

Размеры агрегата (максимальная высота)	60 см x 55 см x 155 см
Транспортные (в штучной упаковке) габариты	26 см x 65 см x 108 см
Регулировка высоты	25 см
Нетто	16,0 кг
Вес с упаковкой	23,5 кг


## Технические характеристики

Пиковая длина волны	От 445 до 465 нм
Пик светового спектра	455 нм
Срок службы лампы	60 000 часов
Эффективная площадь поверхности	50 см x 30 см
Средняя спектральная освещенность	Стандартный режим: $37.0 \mu\text{W}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{nm}^{-1}$ Интенсивный режим: $53.0 \mu\text{W}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{nm}^{-1}$
Коэффициент однородности освещенности	Стандартный режим: 0.59 (Соответствует IEC --> 0.4) Интенсивный режим: 0.60 (Соответствует IEC --> 0.4)

## Стандарты

Электрические параметры	60 Вт, 100-240 В переменного тока, 47-63 Гц
Стандарты	ISO 13485: 2016 EN 60601-1:2006/AC2010 EN IEC 60601-2-50: 2003

Уникальная угловая конструкция Colibri обеспечивает максимальное покрытие кожи

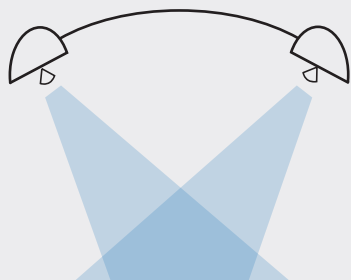

Поперечное сечение Colibri показывает, что мощные светодиоды Philips LUXEON расположены таким образом, чтобы пациенту была оказана эффективная фототерапия на 75% поверхности кожи.

## Информация для заказа и обслуживания

ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ	ПУНКТ ЗАКАЗА №	
Colibri PT	CL1-1000	Основной модуль
АКСЕССУАРЫ	ПУНКТ ЗАКАЗА №	
Пояска на глаз	YPT-1013	Размер: регулируемый
Запасной аккумулятор	CL1-1020	Внутренний - 2 часа
Светомер	LM-800	
Руководство пользователя	CL1-1031/2/3/4/5	EN, VN, FR, SP, RU
ГАРАНТИЯ		
Гарантия	1 год	В соответствии с политикой MTTTS

# MTTS

MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD  
ISO 13485: 2016 Certified Company

For more information or to place an order please contact us at:

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

+84 24 37 666 521

No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street  
Phu Thuong Ward, Tay Ho District  
Hanoi, Vietnam

Распределитель: