



Consulte el Manual del usuario para obtener información completa:
<http://www.mttts-asia.com/wallaby-warmer/>

Lista de componentes opcionales



Polo IV (WLB-1030)



Cajón de almacenamiento
(WLB-1050)



Portacilindros (WLB-1060)



Estante de almacenamiento
(WLB-1040)



Polo de sujeción (WLB-1100)


Portacilindros (WLB-1060)




2 x Tornillo M10x25

Cajón de almacenamiento (WLB-1050)

- 1 Desconecte las partes superior e inferior.
Presione el pestillo negro en ambos lados y deslícelo hacia afuera.

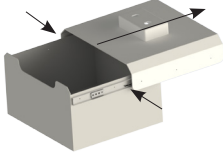

- 2 Fije la parte superior a la unidad de control.
Utilice 2 x tornillo M10x25

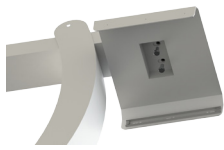

- 3 Conecta la parte inferior.
Deslízate hasta que escuches un sonido de "clic"



Poste IV (WLB-1030), estante de almacenamiento (WLB-1040), Polo de sujeción (WLB-1100)

