

Colibri 
phototherapy

LifeKit by **MTTS**



PHILIPS
LED

CE 2265

COLIBRI

Устройство для фототерапии со **светодиодной подсветкой** для эффективного лечения **желтухи новорожденных** с резервным аккумулятором до 2 часов



Обычно

- Выбираемые пользователем «стандартный» и «интенсивный» режимы
- Может использоваться с недоношенными и доношенными новорожденными.
- Совместимость с любыми лучистыми обогревателями, детской кроваткой или инкубатором, доступными на рынке.
- Никаких движущихся частей, никаких внутренних вентиляторов

Светодиодные фонари

- Оптимальный световой спектр для лечения желтухи
- Регулировка высоты максимально увеличивает воздействие на поверхность кожи

Источник питания

- Блок питания медицинского класса
- Трехконтактное соединение для безопасного электрического заземления (класс I)
- Сохранение энергии

Панель управления

- Кнопка включения / выключения.
- кнопка управления для переключения между нормальным, интенсивным режимами и смотровым освещением

Дисплей / индикаторы

- Яркий, читаемый светодиодный дисплей показывает время процедуры.
- Счетчик времени лечения
- Счетчик общего системного времени (срок службы)
- Счетчик общего времени системы в интенсивном режиме (срок службы)
- Индикатор стандартного / интенсивного режима

Стоять

- Регулируемая высота (115-140 см от источника света) для разной высоты кровати
- Прочные ролики с замками



Габаритные размеры и вес

Размеры агрегата (максимальная высота)	69.5 см x 60.2 см x 155 см
Транспортные (в штучной упаковке) габариты	26 см x 65 см x 108 см
Регулировка высоты	25 см
Нетто	16,0 кг
Вес с упаковкой	23,5 кг


Технические характеристики

Пиковая длина волны	От 465 до 485 нм
Срок службы лампы	60 000 часов
Эффективная площадь поверхности	50 см x 30 см
Средняя спектральная освещенность	Стандартный режим: $37.0 \mu\text{W}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{nm}^{-1}$ Интенсивный режим: $53.0 \mu\text{W}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{nm}^{-1}$
Коэффициент однородности освещенности	Стандартный режим: 0.59 (Соответствует IEC > 0.4) Интенсивный режим: 0.60 (Соответствует IEC > 0.4)

Стандарты

Электрические параметры	60 Вт, 100-240 В переменного тока, 47-63 Гц
Стандарты	EN ISO 13485:2016+A11:2021 EN ISO 14971:2019+A11:2021 EN 60601-1-2:2015+A1:2021 EN 60601-1-6:2010+A1+A2:2021 EN IEC 60601-2-50:2021 EN 60601-1:2006+A1+A12+A2:2021

Уникальная угловая конструкция Colibri обеспечивает максимальное покрытие кожи

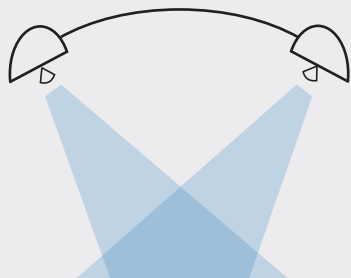

Поперечное сечение Colibri показывает, что мощные светодиоды Philips LUXEON расположены таким образом, чтобы пациенту была оказана эффективная фототерапия на 75% поверхности кожи.

Информация для заказа и обслуживания

ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ	ПУНКТ ЗАКАЗА №	
Colibri PT	CL1-1000	Основной модуль
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРТИКЛЫ	ПУНКТ ЗАКАЗА №	
Повязка на глаз	ID 564/5/6	Размер: регулируемый
Запасной аккумулятор	ID 1494	Внутренний - 2 часа
Светомер	LM-800	
Руководство пользователя		EN, VN, FR, SP, RU
ГАРАНТИЯ		
Гарантия	1 год	В соответствии с политикой MTTTS

MTTS

MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD
ISO 13485: 2016 Certified Company

For more information or to place an order please contact us at:

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

+84 24 37 666 521

No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street
Phu Thuong Ward, Tay Ho District
Hanoi, Vietnam

Распределитель: