

Colibri 
phototherapy

LifeKit by **MTTS**



PHILIPS
LED

CE 2265

COLIBRI

Đèn chiếu LED dùng trong điều trị vàng da sơ sinh với pin dự phòng lên đến 12 giờ



Tổng quan

- Người dùng có thể chọn một trong hai chế độ “ tiêu chuẩn” hoặc “ tăng cường”
- Dùng cho cả trẻ sinh non và trẻ sinh đủ tháng
- Tương thích với thiết bị sưởi ấm bằng bức xạ, giường sơ sinh và các loại lồng ấp trên thị trường
- Không có bộ phận chuyển động và không có quạt bên trong

Hệ thống đèn LED

- Phổ ánh sáng được thiết lập để đạt hiệu quả điều trị tối ưu
- Góc chiếu và vị trí đèn được thiết lập để đạt diện tích chiếu sáng trên da tối đa

Nguồn điện

- Nguồn điện theo tiêu chuẩn y tế
- Đầu cắm 3 chân với chân tiếp đất an toàn (loại I)
- Có cầu chì bảo vệ
- Tùy chọn sao lưu pin 2h hoặc 12h

Bộ điều khiển

- Công tắc bật / tắt
- Gạt nút để thay đổi chế độ “ tiêu chuẩn” và “ tăng cường”

Màn hình hiển thị, thông số

- Màn hình LED sáng, dễ đọc
- Bộ đếm thời gian điều trị
- Bộ đếm tổng thời gian điều trị (tuổi thọ)
- Bộ đếm tổng thời gian điều trị tăng cường (tuổi thọ)
- Đèn báo chỉ số ở chế độ Bình thường/Tăng cường

Chân đế

- Có thể điều chỉnh độ cao (115-140cm từ nguồn sáng) để phù hợp với độ cao của giường
- Bánh xe bền và có khóa



Kích thước và trọng lượng

Kích thước tổng	60 cm x 55 cm x 155 cm
Kích thước đóng gói	24 cm x 106 cm x 68.5 cm
Độ cao điều chỉnh	25 cm
Trọng lượng thực	15.0 kg
T.L vận chuyển	23.5 kg


Thông số kỹ thuật

Đỉnh bước sóng	445 to 465 nm
Đỉnh quang phổ	455 nm
Tuổi thọ đèn	44,000 giờ ở nhiệt độ cao nhất
D.T bề mặt hiệu quả	50 cm x 30 cm
Bức xạ quang phổ trung bình	Chế độ tiêu chuẩn: $33.0 \mu W.cm^{-2}.nm^{-1}$ Chế độ tăng cường: $57.6 \mu W.cm^{-2}.nm^{-1}$
Tỉ lệ đồng nhất bức xạ	Chế độ tiêu chuẩn: 0.59 (IEC compliant --> 0.4) Chế độ tăng cường: 0.58 (IEC compliant --> 0.4)

Các yêu cầu khác

Đặc điểm nguồn	Điện áp: 220V AC 10% Tần số: 47 - 63 Hz Công suất: 40W
Yêu cầu về đơn vị	ISO 13485: 2012 EN 60601-1:2006/AC2010 EN IEC 60601-2-50: 2003

Colibri với thiết kế góc đặc biệt, đảm bảo diện tích da được chiếu lớn nhất

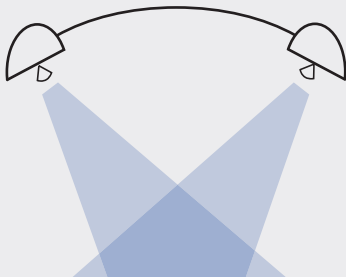

Mặt cắt ngang của đèn Philips LUXEON công suất lớn đảm bảo ánh sáng bao phủ 75% cơ thể bệnh nhân.

Thông tin đặt hàng và dịch vụ

THIẾT BỊ CHÍNH	MÃ SỐ	SỐ LƯỢNG
Đèn chiếu Colibri	CL1-1000	01
PHỤ TÙNG		
Máng LED		01
Chân đế		01
Bánh xe		04
Cột đỡ		01
Dây nguồn		01
PHỤ KIỆN		
Băng mắt (cỡ S)	YP T-1010	05
Băng mắt (cỡ M)	YP T-1011	05
Băng mắt (cỡ L)	YP T-1012	05
Hướng dẫn sử dụng	CL1-1031/2/3/4	01

BẢO HÀNH

Tiêu chuẩn bảo hành 1 năm

Theo chính sách của MTTTS

MTTS

CÔNG TY TNHH CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ
CHỨNG NHẬN ISO 13485:2016

Thông tin chi tiết và cách đặt hàng, xem tại:

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

+84 24 37 666 521

Số 26 ngõ 41 Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Nhà phân phối: