

Thông tin chung
Bộ điều khiển PID của nhiệt độ bệnh nhân
Bức xạ thanh trở nhiệt là 450W
Thuật toán thông minh phát hiện khi đặt sai vị trí cảm biến
Hệ thống kiểm soát về trạng thái an toàn khi cần
Các chỉ số báo động dễ nhìn và phát ra âm thanh

Màn hình hiển thị các thông số	Đặc điểm khác
Cài đặt nhiệt độ	Cảm biến nhiệt độ môi trường xung quanh
Nhiệt độ bệnh nhân	Đầu ra SSR
Cảnh báo nhiệt độ	Đèn Halogen công suất 35W
Thời gian điều trị	Thanh trở nhiệt có điện áp thấp
Đồng hồ đo chỉ số APGAR	Bộ điều khiển nhiệt độ PID hoàn chỉnh với bộ dự phòng chế độ an toàn khi cần
Tổng thời gian sử dụng	
Mức công suất làm nóng	
Bảo cảm biến kết nối	Nhiệt độ
Chỉ số nguồn	Nhiệt độ hoạt động: 19.0 C– 40.0 C
Màn hình hiển thị LCD cho việc chẩn đoán và xử lý thông tin sự cố	Nhiệt độ bệnh nhân: 34.0 C – 38.0 C
Kích thước	Trọng lượng
Chiều cao: 175 cm	Trọng lượng sản phẩm: 49 kg
Chiều rộng: 43 cm	Trọng lượng đóng gói: 59.9 kg

Yêu cầu	
Yêu cầu về nguồn điện:	
Nguồn AC: 220V AC +-10%, 47 - 63 Hz	Tối đa 500 watt
Yêu cầu về khí:	
Không có	
Yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng:	
ISO 13485: 2003; IEC 60601-2-21-2009	



TÌM KIẾM GIẢI PHÁP TỐT NHẤT CHO BẠN
Giải pháp công nghệ phù hợp trong y tế

ISO 13485: 2003

Để biết thêm thông tin hoặc đặt hàng, hãy liên hệ với chúng tôi theo:

E-mail: assistance@mtts-asia.com
Điện thoại: +84 43766 6521
Website: http://mtts-asia.com
Địa chỉ: Số 26 Ngõ 41 An Dương Vương
Phú Thượng, Tây Hồ
Hà Nội

Nhà phân phối:

GIƯỜNG SƯỞI SƠ SINH MTTS


Giữ ấm và kiểm soát nhiệt độ cơ thể trẻ



- Những đặc điểm quan trọng

- Chế độ an toàn
- Cảm ứng nhiệt độ cơ thể
- Đèn halogen
- Chi phí hiệu quả
- Thân thiện với người dùng
- Thân bằng thép không gỉ chắc chắn
- Hệ thống báo động nhiệt độ dưới tiêu chuẩn / trên tiêu chuẩn

Giường sưởi y tế chất lượng dành cho điều trị bệnh nhi và sơ sinh giúp phòng ngừa giảm thân nhiệt ở trẻ.

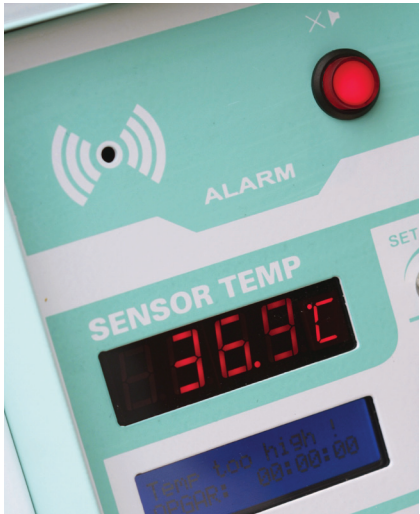

Các đặc điểm quan trọng khác của Giường sưởi MTTs:

- Có thể dùng được cho cả bệnh nhi và trẻ sơ sinh
- Bộ kiểm soát nhiệt độ của bệnh nhân tự động an toàn với việc phát hiện sự cố thông minh và chế độ dự bị tự chuyển sang an toàn
- Video và sách hướng dẫn sử dụng
- Hướng dẫn cho kỹ thuật viên bệnh viện
- Tất cả các linh kiện thay thế đều có sẵn

Các chi tiết kỹ thuật:

- Đầu cắm 3 chân 1 chân tiếp đất an toàn
- Cầu chì bảo vệ điện
- Cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số kiểm soát nhiệt độ chính xác
- Rơ le rắn chắc có tuổi thọ cao

Thông tin đặt hàng và dịch vụ

Sản phẩm chính	Số đặt hàng sản phẩm	Sản phẩm chính
Sản phẩm Giường sưởi	WMR-1000	Sản phẩm chính
Phụ kiện	Item Order No	
Cảm biến da	WMR-1010	
Mũ sơ sinh (S)	WMR-1021	cỡ nhỏ
Mũ sơ sinh (M)	WMR-1022	cỡ vừa
Mũ sơ sinh (L)	WMR-1023	cỡ lớn
Sách hướng dẫn sử dụng	WMR-1031	Tiếng Việt
Bảo hành		
Tiêu chuẩn bảo hành:		1 năm
Theo chính sách của MTTs		