



Xem sách hướng dẫn sử dụng để có thông tin đầy đủ hơn:  
<http://www.mtts-asia.com/vi/giuong-suoi-so-sinh-wallaby/>

### Danh sách phụ kiện tùy chọn



Cột Truyền (WLB-1030)



Ngăn Kéo (WLB-1050)



Kệ (WLB-1040)



Giá đựng bình Oxy (WLB-1060)


### Giá đựng bình Oxy (WLB-1060)



2 x Bu lông M10x25

## Ngăn Kéo (WLB-1050)

- ① Tháo rời phần thân trên và thân dưới  
Ấn chốt màu đen ở hai đầu và đẩy ra

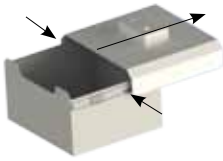

- ② Lắp phần thân trên vào bộ điều khiển  
Sử dụng 2 bu-lông có kích thước M10x25



- ③ Lắp phần thân dưới và trượt vào đúng vị trí cho  
đến khi bạn nghe thấy tiếng “click” là được.



## Cột Truyền (WLB-1030) và Kệ (WLB-1040)

