



Ver el Manual de usuario para información más detallada:  
<http://www.mttts-asia.com/wallaby-warmer/>


## Modos de operacion

Toque el panel de selección de MODO para ingresar a la pantalla de selección de MODO



### MODO BEBÉ


Temperatura establecida:  
34°C - 37.5°C

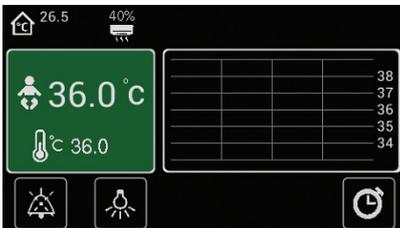

En el MODO BEBÉ, el calentador proporciona un control estable de la temperatura de la piel del bebé al ajustar automáticamente la potencia del calentador para compensar las diferentes condiciones fisiológicas y ambientales.

### MODO PRECALIENTE


Temperatura establecida:  
no disponible

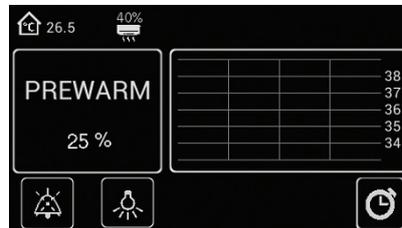

En el modo MODO PRECALIENTE, el calentador proporciona una alarma general de precalentamiento del calentador y el ambiente sobre el colchón más caliente.

### MODO MANUAL

Establecer la potencia del calentador: 0-100%

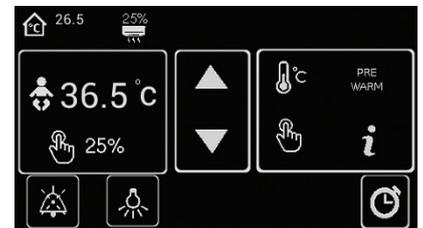

En el MODO MANUAL, el calentador proporciona energía del calentador ajustable por el usuario y la opción de controlar la temperatura de la piel del bebé usando el sensor de piel.




Si la temperatura de la piel del paciente es más de 1°C por encima del punto de ajuste, entonces el calentador está apagado y el valor de salida que se muestra es 0 (cero).

## Temporizadores

### APGAR

Alarma a los 1, 5 y 10 minutos. Se apaga después de 60 minutos.

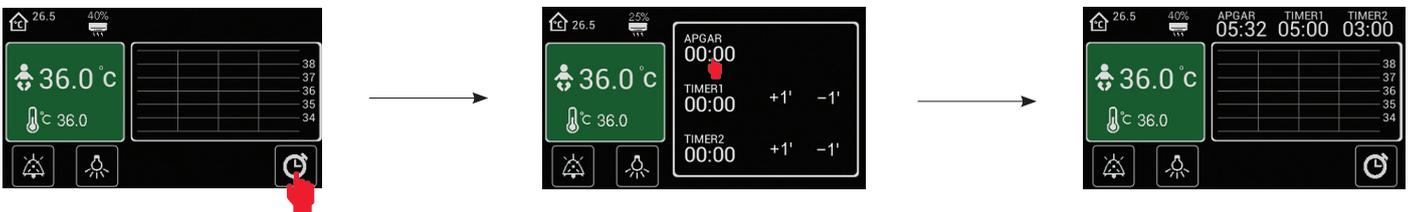

### TEMPORIZADORES DE PROCEDIMIENTO

Alarma al final del periodo preestablecido de 1 a 99 minutos.



## Alarmas


Alarmas	Modo	Porque	Efecto	Botón de silencio
<b>TEMP ALTA PIEL</b> 	BEBÉ	Temperatura de la piel medida más alta que la temperatura establecida en 1°C	Calentador de potencia desactivado	Sólo silencia la alarma sonora
	MANUAL	Temperatura de piel medida superior a 38°C	Calentador de potencia desactivado	Sólo silencia la alarma sonora
	PRECALIENTE	No activo	No activo	No activo
<b>TEMP DE PIEL BAJA</b> 	BEBÉ	Temperatura de la piel medida más baja que la temperatura establecida en 1°C	Calentador reducido al 25% de potencia.	Cancela la alarma y restaura la potencia del calefactor
	MANUAL	No activo	No activo	No activo
	PRECALIENTE	No activo	No activo	No activo
<b>SENSOR DESCONECTAR</b> 	BEBÉ	Sensor de piel desenchufado o defectuoso	Calentador reducido al 25% de potencia.	Sólo silencia la alarma sonora
	MANUAL	No activo	No activo	No activo
	PRECALIENTE	No activo	No activo	No activo
<b>FALLO DE ALIMENTACIÓN</b> 	TODOS	La fuente de alimentación al calentador falló	Calentador desactivado	Sólo silencia la alarma sonora
<b>ERROR</b> 	TODOS	Falla de software o hardware (Consulte el Manual de servicio para obtener más información sobre los códigos de error)	Calentador desactivado	Sólo silencia la alarma sonora




Cuando esté disponible, el período de alarma de silencio es de 10 min.

## Procedimiento de x-ray

1. Apague el interruptor principal del dispositivo y silencie la alarma de falla de energía
2. Espere hasta que el dispositivo se enfríe.
3. Levante la unidad superior
4. Mueva la unidad superior a la izquierda o derecha
5. Después de completar el procedimiento de x-ray, devuelva la unidad superior a la posición central
6. Asegúrese de que la unidad superior esté bloqueada en la posición central
7. Encienda el dispositivo

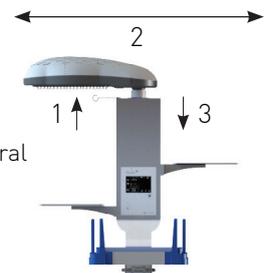

## Apagando el calentador

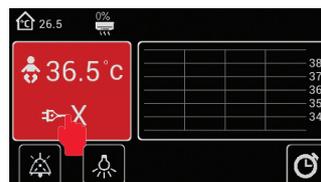

La acción activará la alarma de FALLA DE ALIMENTACIÓN.

Mantenga presionado el símbolo de APAGADO durante 3 segundos