

Colibri 
phototherapy

LifeKit by **MTTS**



PHILIPS
LED

CE 2265

COLIBRI

Đèn chiếu LED dùng trong điều trị vàng da sơ sinh



I. Tổng quan

- Người dùng có thể chọn một trong hai chế độ “ tiêu chuẩn” hoặc “ tăng cường”
- Dùng cho cả trẻ sinh non và trẻ sinh đủ tháng
- Tương thích với thiết bị sưởi ấm bằng bức xạ, giường sơ sinh và các loại lồng ấp trên thị trường
- Tản nhiệt thông minh giúp tản nhiệt nhanh tăng tuổi thọ bóng đèn

II. Mô tả chi tiết

1. Hệ thống đèn LED

- Phổ ánh sáng được thiết lập để đạt hiệu quả điều trị tối ưu
- Hai máng đèn được thiết kế theo dạng tán lá, hợp thành một góc 60 độ với mục đích tăng diện tích điều trị lên tới 75% bề mặt da của bệnh nhân
- 02 giàn đèn mỗi giàn 12 bóng LED công suất cao (3w / bóng)

2. Nguồn điện

- Nguồn điện theo tiêu chuẩn y tế
- Đầu cắm 3 chân với chân tiếp đất an toàn (loại I)
- Có cầu chì bảo vệ

3. Bảng điều khiển

- Bật tắt đèn dễ dàng với một nút nhấn
- Nút nhấn riêng biệt chuyển chế độ “tiêu chuẩn” và “tăng cường”
- Hiển thị số giờ điều trị ở chế độ “tiêu chuẩn”; “tăng cường”
- Hiển thị tổng thời gian đã sử dụng (tuổi thọ đèn)

4. Chân đế

- Thép sơn tĩnh điện có thể điều chỉnh độ cao (115-140 cm từ nguồn sáng) để đạt độ cao mong muốn
- Bánh xe: 04 bánh xe xoay 360° có khóa chống trôi

III. Phần chọn thêm

1. Bộ pin dự phòng

- Bộ pin lắp bên trong máy (duy trì 2 tiếng trường hợp hợp mất nguồn điện đột ngột)

2. Đồng hồ đo công suất ánh sáng

- Đồng hồ đo công suất ánh sáng Light meter mã số LM-800 giúp đo chính xác công suất ánh sáng của đèn



Kích thước và trọng lượng

Kích thước tổng	60 cm x 55 cm x 155 cm
Kích thước đóng gói	26 cm x 65 cm x 108 cm
Độ cao điều chỉnh	25 cm
Trọng lượng thực	16 kg
Trọng lượng vận chuyển	23.5 kg


Thông số kỹ thuật

Loại LED	Philips LUXEON xanh công suất cao
Dải bước sóng	445 - 465 nm
Đỉnh quang phổ	455 nm
Tuổi thọ đèn	60,000 giờ
Bức xạ quang phổ trung bình	Chế độ tiêu chuẩn 28.0 $\mu\text{W} / \text{cm}^2 / \text{nm}$ Chế độ tiêu tăng cường 40.6 $\mu\text{W} / \text{cm}^2 / \text{nm}$
Diện tích bề mặt chiếu	50 cm x 30 cm
Tỉ lệ đồng nhất	Chế độ tiêu chuẩn 0,59 (các thiết bị IEC --> 0,4) Chế độ tiêu tăng cường: 0,60 (các thiết bị IEC --> 0,4)

Các yêu cầu khác

Nguồn	60W, 100-240VAC, 47-63Hz
Yêu cầu chứng nhận SX	EN ISO 13485-2016 EN 60601-1:2006/AC2010 EN IEC 60601-2-50: 2003 Chứng nhận CE lưu hành tự do tại thị trường Châu Âu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế tại Việt Nam của Bộ Y tế Bản kết quả phân loại trang thiết bị y tế

Colibri với thiết kế góc đặc biệt, đảm bảo diện tích da được chiếu lớn nhất

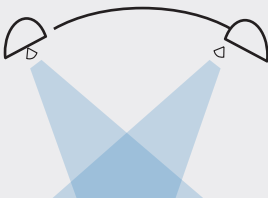

Mặt cắt ngang của đèn Philips LUXEON công suất lớn đảm bảo ánh sáng bao phủ 75% cơ thể bệnh nhân.

Thông tin đặt hàng và dịch vụ

THIẾT BỊ CHÍNH	MÃ SỐ	SỐ LƯỢNG
Đèn chiếu Colibri	CL1-1000	01
PHỤ TÙNG		
Máng LED		01
Chân đế		01
Bánh xe		04
Cột đỡ		01
Dây nguồn		01
PHỤ KIỆN		
Băng mắt	YP T-1013	05
Hướng dẫn sử dụng	CL1-1031/2/3/4	01

BẢO HÀNH

Bảo hành tiêu chuẩn 1 năm theo chính sách của MTTTS

MTTS

CÔNG TY TNHH CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ

Thông tin chi tiết và cách đặt hàng xem tại:

[@ info@mtts-asia.com](mailto:info@mtts-asia.com)

[www http://mtts-asia.com](http://mtts-asia.com)

[☎ 024 37 666 521](tel:02437666521)
[091 438 9990](tel:0914389990)

[📍](#) Số 26 ngõ 41 Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Nhà phân phối: