

Dolphin

CPAP




LifeKit by **MTTS**



CE 2265

DOLPHIN

Аппарат пузырькового CPAP для **новорожденных**, которым требуется респираторная поддержка.

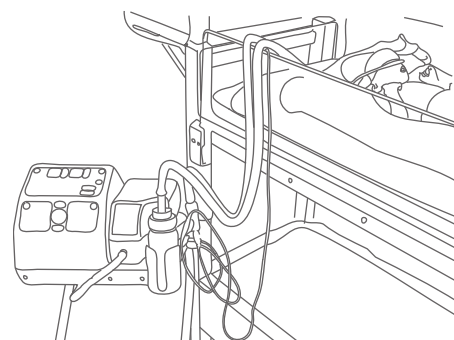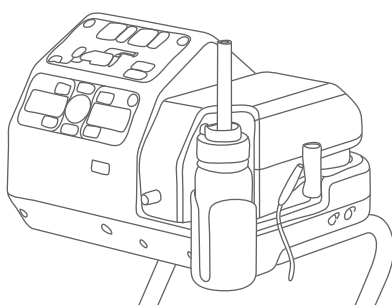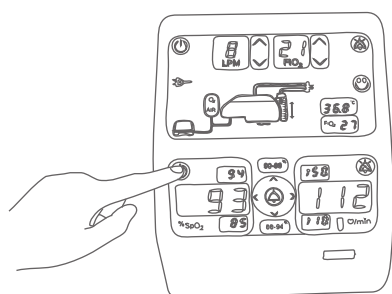

Обычно

- 100% многоразового использования и очистки
- Комплексное устройство для лечения и мониторинга СРАР
- Интегрированная конструкция включает смешивание газов, увлажнение, камеру РЕЕР, воздушный компрессор и импульсный датчик в одном компактном устройстве
- 2 часа резервного питания от батареи (исключая жару и влажность)

РЕЕР

- Инновационный дизайн для безопасной и простой регулировки одной рукой
- Хорошо виден спереди устройства

Смешивание газов

- Электронное смешивание для простой и независимой регулировки расхода и FiO₂
- Прямая установка FiO₂, без расчетов или таблиц
- Внутренний регулятор обеспечивает безопасное подключение к различным источникам кислорода.

Увлажнитель

- Автоматически заправляется для 3-дневной непрерывной работы
- Небольшой объем с подогревом для быстрого разогрева
- Мощность нагревателя регулируется автоматически для поддержания правильной влажности и минимизации дождя.

Контур пациента

- Полностью многоразовый
- Большинство деталей можно автоклавируются
- Можно подвергнуть химической дезинфекции, если автоклав недоступен
- Включает в себя провод внутреннего нагревателя и датчики температуры
- Прочные, но гибкие силиконовые трубки

Габаритные размеры и вес

| | |
|--|-----------------------|
| Размеры агрегата (без опорного кронштейна) | 80 см x 38 см x 38 см |
| Транспортные (в штучной упаковке) габариты | 51 см x 45 см x 88 см |
| Нетто | 18 кг |
| Вес с упаковкой | 28 кг |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------|--|
| РЕЕР | Тип: Пузырьковый Диапазон давления: от 0 до 10 см вод. Ст. |
| Смешивание газов | Тип: Электронный Содержание кислорода / FiO ₂ : от 21 до 99% Расход: от 4 до 9 л / мин |
| Воздушный компрессор | Тип: Воздуходувка Источник питания: встроенный, 12 В постоянного тока |
| Газоснабжение | Диапазон входного кислорода: 3.5 - 60 psi Кислородный разъем: DISS 1240 |
| Увлажнитель | Тип: Пасха Влажность: > 90% относительной влажности Время разогрева: <10 минут при комнатной температуре Время между заправками: 3 дня (приблизительно) |
| Контур пациента | Тип: с подогревом, многоразовый Температура газа по умолчанию: 37 ° C (диапазон 35-40 ° C) |
| Пульсоксиметр | Измерение SPO ₂ : 1 - 100% SPO ₂ Измерение ударов в минуту: 25 - 240 ударов в мин. |
| Уровень шума устройства | <50 дБ на расстоянии 1 метра |

Стандарты

| | |
|-------------------------|--|
| Электрические параметры | Напряжение: 100-240 В переменного тока Частота: 50-60 Гц Потребляемая мощность: 240 Вт МАКС. |
| Стандарты | ISO 13485: 2016 EN 60601-1-2/6/8: 2010 EN 80601-2-61: 2011 ISO 8185: 2009 |


Распределитель:

Пульсоксиметр

- Пульсоксиметрия интегрирована в прибор
- Выбор технологии MTTs и Masimo SET® для точных, надежных и надежных измерений
- Простой пользовательский интерфейс и настройки сигнализации
- Никаких многоуровневых меню или сложных последовательностей кнопок

Воздушный компрессор

- Встроенный воздушный компрессор означает отсутствие необходимости во внешнем источнике воздуха.
- Полностью интегрированный, без грязных внешних проводов или трубок

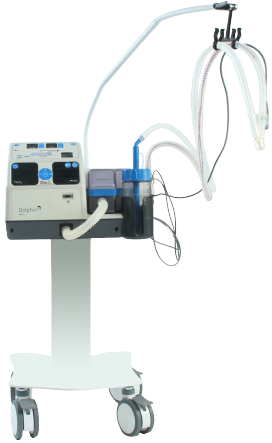

Информация для заказа и обслуживания

| ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ | МОДЕЛЬ | ПУНКТ ЗАКАЗА № |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| СРАР | 1.20 | CPD-10000 |
| КОНФИГУРАЦИЯ | | |
| Газовый шланг | Кислородный соединитель | ID 150 + Connector |
| Кабель переменного тока | EU/US-VN/UK | ID 551/2/3 |
| Руководство пользователя | EN/FR/VN | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ | | ПУНКТ ЗАКАЗА № |
| Увлажнитель | | ID 1006 |
| Камера РЕЕР | | ID 1007 |
| Набор силиконовых трубок | | ID 1008 |
| Линия волочения провода нагревателя | | ID 991 |
| Датчик температуры | | ID 990 |
| Разъем провода нагревателя | | ID 1312 |
| Датчик кислорода | | ID 2040 |
| Входной газовый фильтр | | ID 1219 |
| Щетка | | ID 1000 |
| Датчик пульсоксиметра | | ID 999 |
| РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ | | ПУНКТ ЗАКАЗА № |
| Назальная канюля MTTs | Размер 0/1/2/3/4/5/6 | ID 2062/3/4/5/6/7/8 |
| ГАРАНТИЯ | | |
| Гарантия | 1 год | В соответствии с политикой MTTs |



MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD
ISO 13485: 2016 Certified Company

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

+84 24 37 666 521

No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street
Phu Thuong Ward, Tay Ho District
Hanoi, Vietnam