Wallaby warmer Instructions de montage

MTTS

> Consulter le Manuel d'Utilisation pour de plus amples informations:
> http://www.mtts-asia.com/wallaby-warmer/

ÉTAPE 1 - Retirez les composants de la boîte



x 1 Base



x 1 Supporter



x 1 Châssis en plastique



x 1 Unité de contrôle



x 1 Lit avec plateau à rayons X



x 2 Panneau latéral 54cm

x 2 Panneau latéral 64cm



x 1 Matelas de lit



x 2 Étagères de rangement



x 4 Boulon M10x80
x 4 Boulon M10x25
x 1 Boulon M10x120 + 2 Écrous
x 1 Boulon M10x60 + 1 Écrou




x 1 Manivelle




x 2 Sensor de piel

ÉTAPE 2 - Fixez le support à la base

> Deux personnes pourraient être tenues de effectuer cette étape

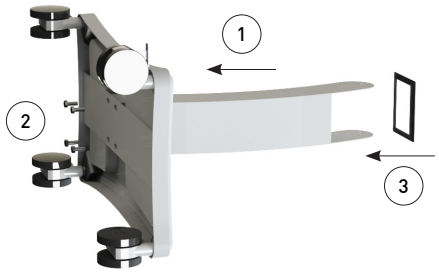


ÉTAPE 3 - Fixez l'unité de commande et la manivelle au support

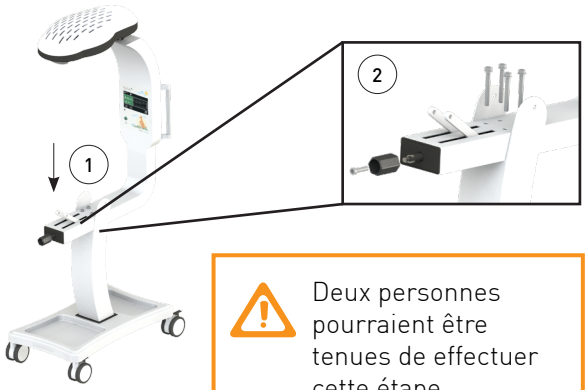


> Deux personnes pourraient être tenues de effectuer cette étape

ÉTAPE 4 - Fixez le panneau latéral au lit

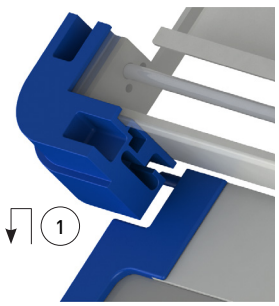


> Fixez uniquement le panneau latéral le plus proche de l'unité de contrôle à cette étape.
> Les panneaux restants seront fixés à l'étape 6.

ÉTAPE 5 - Fixer le lit

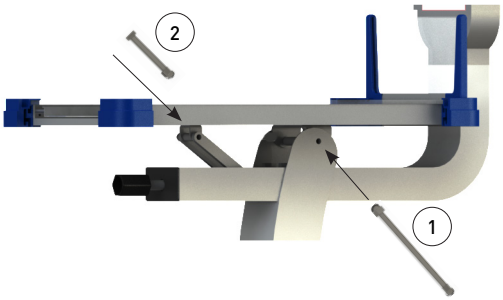


ÉTAPE 6 - Fixez les 3 panneaux latéraux restants au lit

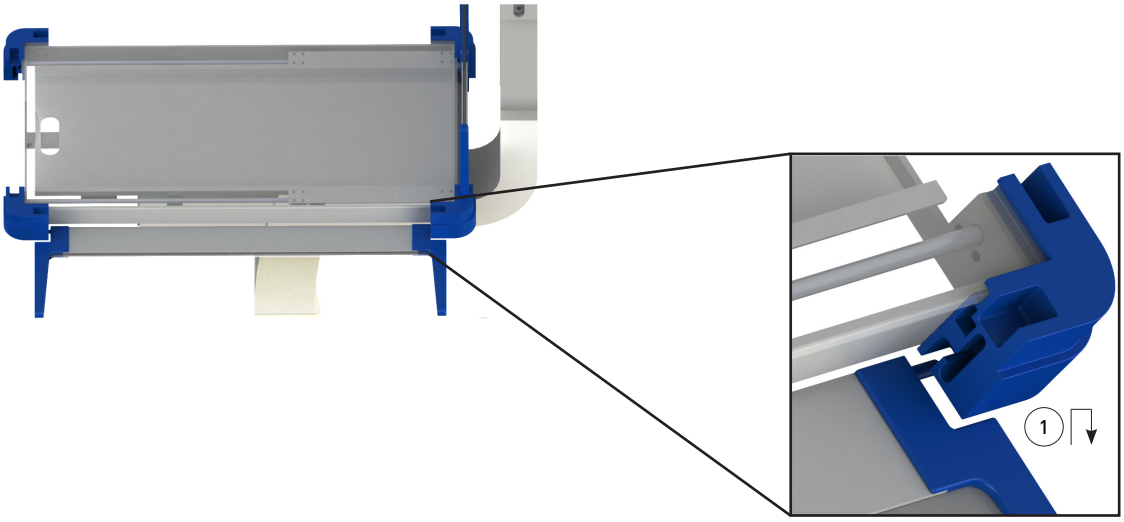

ÉTAPE 8 - Fixation des étagères de rangement



ÉTAPE 9 - Branchez et allumez

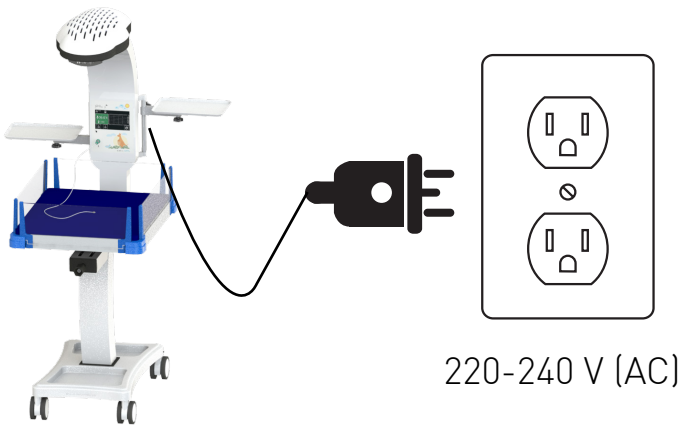

Veillez à retirer la protection de l'élément chauffant avant la première utilisation.

