Wallaby warmer

Hướng dẫn lắp đặt

MTTS

> Xem sách hướng dẫn sử dụng để có thông tin đầy đủ hơn:
> http://www.mtts-asia.com/vi/giuong-suoi-so-sinh-wallaby/

BƯỚC 1 - Lấy các phụ kiện ra khỏi hộp



x 1 Chân đế



x 1 Cột đỡ dưới



x 1 Khung nhựa bịt chân đế



x 1 Bảng điều khiển



x 1 Giường có khay chụp X-quang



x 2 Tấm chắn 54cm



x 2 Tấm chắn 64cm



x 1 Đệm



x 2 Khay để đồ



x 4 Bu lông M10x80
x 4 Bu lông M10x25
x 1 Bu lông M10x120 + 2 đai ốc
x 1 Bu lông M10x60 + 1 đai ốc




x 1 Tay quây




x 2 Cảm biến qua da

BƯỚC 2 – Lắp Cột đỡ dưới vào Chân đế

> Bước này có thể cần 2 người thực hiện

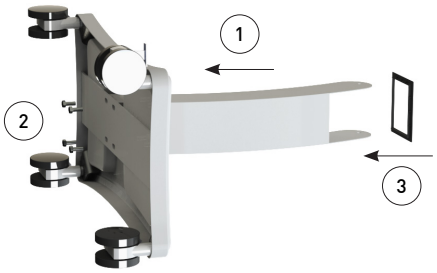


BƯỚC 3 – Gắn bộ phận điều khiển vào thân

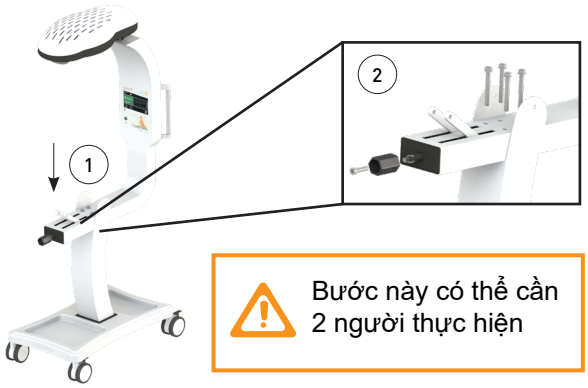


> Bước này có thể cần 2 người thực hiện

BƯỚC 4: Gắn các tấm chắn vào giường

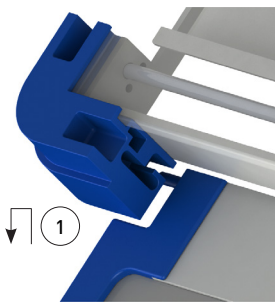


> Bước này chỉ cần gắn tấm chắn gần nhất với bộ phận điều khiển.
> Tấm còn lại sẽ gắn ở bước 6.

BƯỚC 5 – Gắn giường

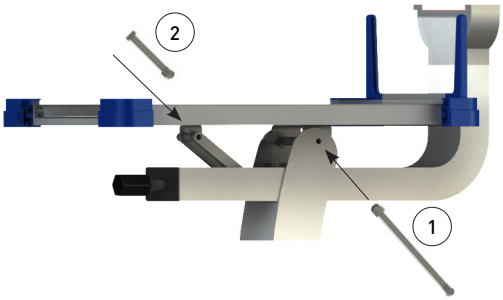


BƯỚC 6 – Gắn các tấm chắn còn lại vào giường

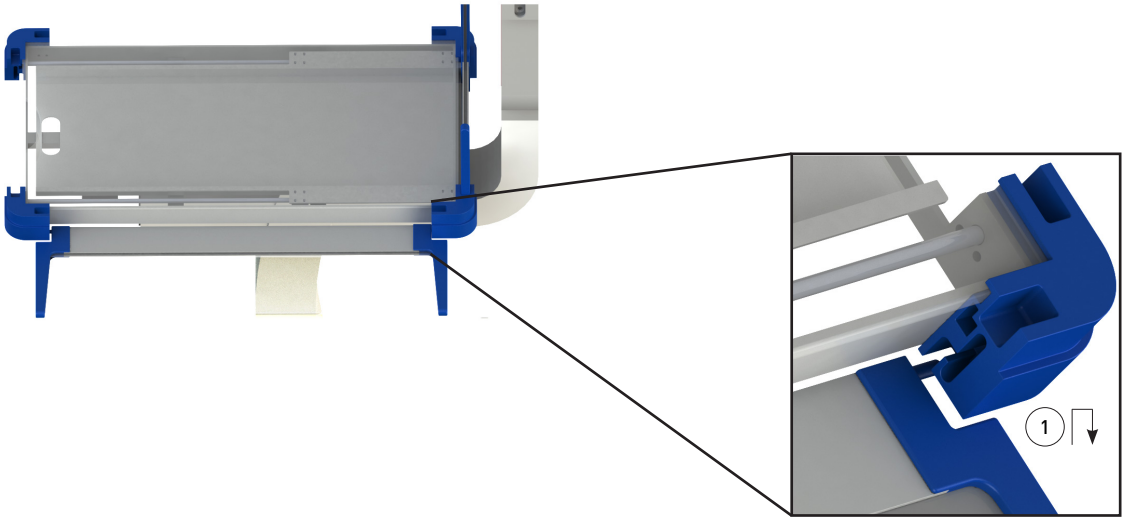

BƯỚC 8 – Gắn khay để đồ



BƯỚC 9 – Cắm dây điện vào nguồn điện

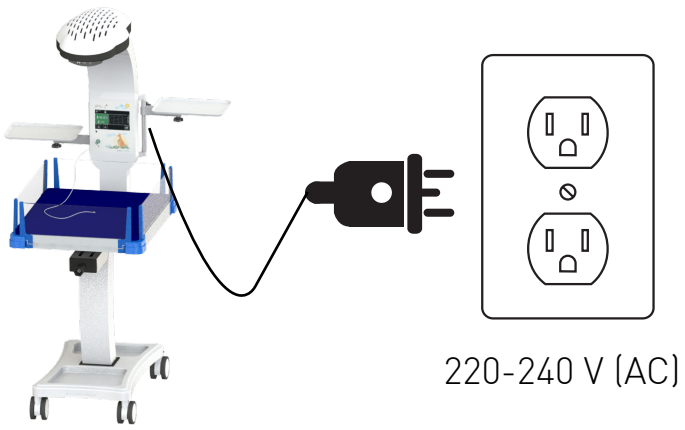

LƯU Ý: Hãy nhớ tháo lớp bảo vệ khỏi bộ phận gia nhiệt trước khi sử dụng lần đầu.

