Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour des informations complètes:
http://www.mtts-asia.com/wallaby-warmer/

Liste des composants optionnels



IV Pole (ID 1331)



Tiroir de rangement
(ID 1332)



Porte-bouteilles (ID 1333)




Étagère de rangement
(ID1254)



Poteau de maintien
(ID 1792)

Porte-bouteilles (ID 1333)




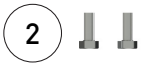


2 x Boulon M10x25

Tiroir de rangement (ID 1332)

1 Déconnecter les parties supérieure et inférieure
Appuyez sur le loquet noir des deux côtés et faites-le glisser

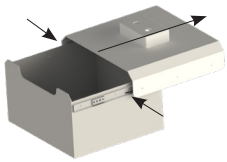

2 Fixez la partie supérieure à l'unité de contrôle
Utilisez 2 x boulons M10x25

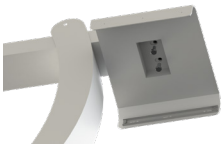

3 Connecter la partie inférieure
Faites glisser jusqu'à ce que vous entendiez un son de «clique»



Poteau IV (ID 1331), étagère de stockage (ID 1254), Poteau de maintien (ID 1792)

