Wallaby warmer Hướng dẫn lắp đặt phụ kiện Wallaby MTTS

Xem sách hướng dẫn sử dụng để có thông tin đầy đủ hơn:
http://www.mtts-asia.com/vi/giuong-suoi-so-sinh-wallaby/

Danh sách phụ kiện tùy chọn



Cột Truyền (ID 1331)



Ngăn Kéo (ID 1332)



Giá đựng bình Oxy (ID 1333)




Kệ (ID 1254)



Cột Giữ (ID 1792)

Giá đựng bình Oxy (ID 1333)




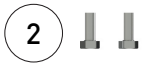


2 x Bu lông M10x25

Ngăn Kéo (ID 1332)

1. Tháo rời phần thân trên và thân dưới
Ấn chốt màu đen ở hai đầu và đẩy ra

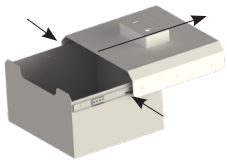

2. Lắp phần thân trên vào bộ điều khiển
Sử dụng 2 bu-lông có kích thước M10x25

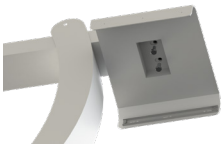

3. Lắp phần thân dưới và trượt vào đúng vị trí cho đến khi bạn nghe thấy tiếng “click” là được.



Cột Truyền (ID 1331), Kệ (ID 1254), Cột Giữ (ID 1792)

